

SEMPs
POSICIONAMIENTO
Y SEDESTACION

- *Base rígida para posicionamiento
- *Prevención de úlceras por presión
- *Fabricación personalizada

SISTEMA POSICIONAMIENTO

Base Rígida Redondeada

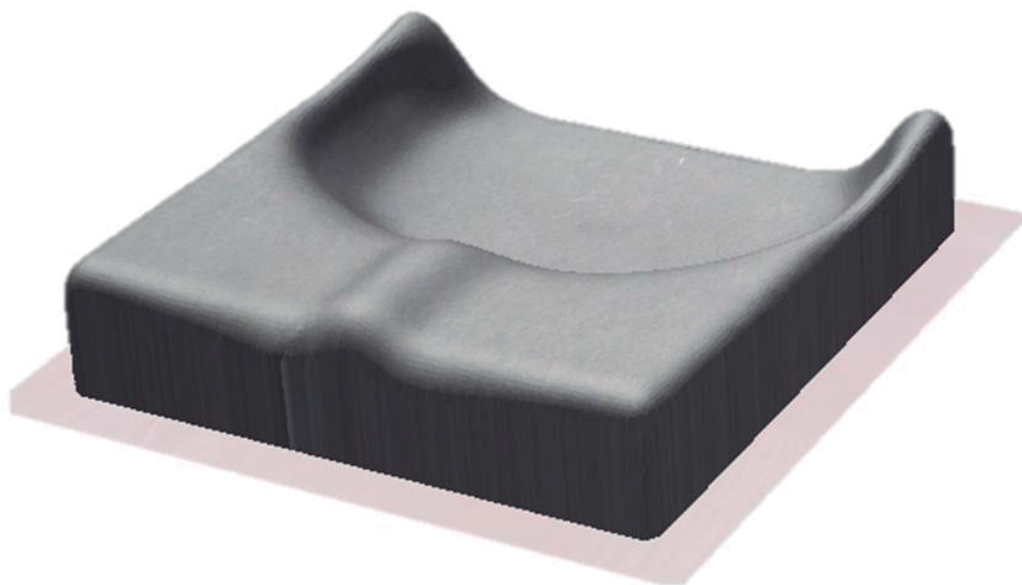


División Sanitaria
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330
www.cqfarma.com

Cojín base rígida y forma redondeada - CQFSYS002

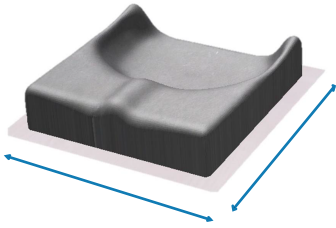


BASE DE POLIETILENO:

Compuesto de una base con forma anatómica y área pélvica con forma redondeada, fresada en polietileno, un material ligero de peso pero con una rigidez adecuada para un buen soporte y posicionamiento del usuario.

Para usuarios que no requieren de control de caderas ni estabilización pélvica lateral.



Possibilidad de personalizar medidas de ancho y profundidad

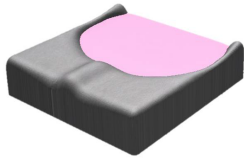

RELLENO VISCOELÁSTICO:

El hueco pélvico se rellena con espuma viscoelástica termosensible, que se adapta a la forma o anatomía del usuario con la propia temperatura corporal, ofreciendo así una superficie preventiva de úlceras.

Accesorios para completar el posicionamiento

Diferentes materiales, cuñas, alineadores y demás accesorios para completar el posicionamiento y una total adaptación del producto a las necesidades de cada usuario.

Para isquiones: plancha de gel o planchas de espuma (visco o poliuretano)




Alineadores de cadera o muslos: sirven para cubrir los controles laterales. Espuma de poliuretano



Planchas completas: de gel o espumas



Cuñas rígidas: basculantes, coroneales y/o sagitales

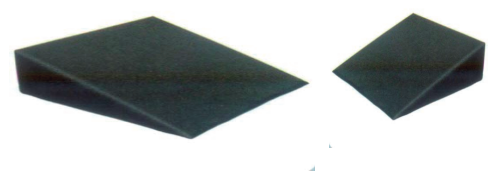

AlivioVisco adhesivo: para acolchar zonas críticas



Enfundado con velcros: para pegar accesorios a la base



Funda con tejido 3D

Funda con tejido 3D con una parte exterior transpirable y con una fina capa impermeable en su cara interior para limitar el paso de líquidos al interior del cojín. Base con tejido elástico y cierre mediante cremallera.



Comercial Quirúrgica Farmacéutica



Producto Sanitario Clase I no estéril (R.D. 1591 / 2009)