
SEMPs
SEDESTACIÓN
Cojín anatómico

Prevención Úlceras por Presión

Espuma de poro abierto , transpirable

Posicionamiento

100% libre de látex

SANITIFOAM®
CQFPREVENT



División Sanitaria
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330
www.cqfarma.com

SEMP SEDESTACIÓN


Cojín anatómico preventivo Posicionamiento

El cojín SANITIFOAM® anatómico está fabricado con espuma viscoelástica de alta calidad y está destinado a contribuir en la prevención de úlceras por presión en aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas. Su diseño de forma anatómica contribuye a un buen posicionamiento de la cadera, a la vez que las propiedades termosensibles de la espuma permiten que se adapte a la forma del cuerpo con la propia temperatura corporal.



INTERIOR

Espuma viscoelástica de alta calidad, fabricada mediante un sistema de poro abierto que crea unas celdillas de aire permitiendo una mayor transpiración y flexibilidad del material.

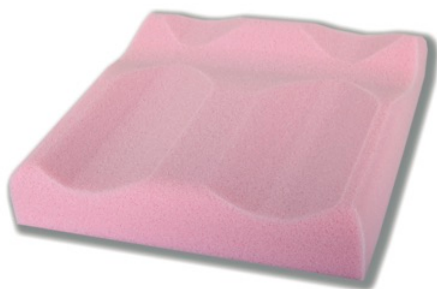

Sus propiedades termosensibles hacen que se adapte a la postura del cuerpo con la propia temperatura corporal y además su forma anatómica contribuye a un mejor posicionamiento de la cadera.



Fabricación por célula abierta



Densidad Visco Rosa



100% Libre de Latex



Lavable

Composición viscoelástica

Densidad 50 kg/m³

Dureza 4 kPa

Medidas	Funda	Referencia
42 x 42 x 7,5 cm	BE	CQF099BE



El cojín incluye una mochila con asa regulable, y reutilizable.

FUNDA



BIELASTICA

Fabricada con tejido de poliuretano bi-elástico, impermeable a líquidos, transpirable, muy suave y con cremallera lateral para poder retirarla para lavar cuando sea necesario, ya que se puede limpiar y desinfectar en superficie.

ANTIDESLIZANTE

En su base el tejido es antideslizante, para limitar también el desplazamiento del cojín sobre la silla y contribuir a que el usuario no se deslice.

Composición	Poliamida y Poliuretano
Limpieza Funda	Limpieza: max. 95%. No usar lejía ni derivados. No planchar. No se recomienda lavado en seco o secado a máquina.
Limpieza Espuma	Lavar sólo cuando sea estrictamente necesario. max. 60°C Detergente suave o neutro. Usar una funda protectora. No escurrir retorciendo. No centrifugar. No usar lejía ni derivados del Cloro. No planchar. No se recomienda lavado en seco ni secado a máquina.



Funda Bielástica



Impermeable



Transpirable



Antialérgica



Desinfectable y esterilizable



Lavable

Ed. 5



Comercial Quirúrgica Farmacéutica



Producto Sanitario Clase I
(R.D. 1591 / 2009)

CQF (Comercial Quirúrgica Farmacéutica). Autovía A 42 Madrid-Toledo, Km. 63.300 - P. I. Matracón, 4 - 45280 Olías del Rey (Toledo). España.
Telfs.: +34 925 354 330 - Fax: +34 925 353 803. www.cqfarma.com / cqf@cqfarma.com